


VistaCHROM软件

Chromatotec®公司开发的一款功能强大而且易于应用的色谱分析法软件

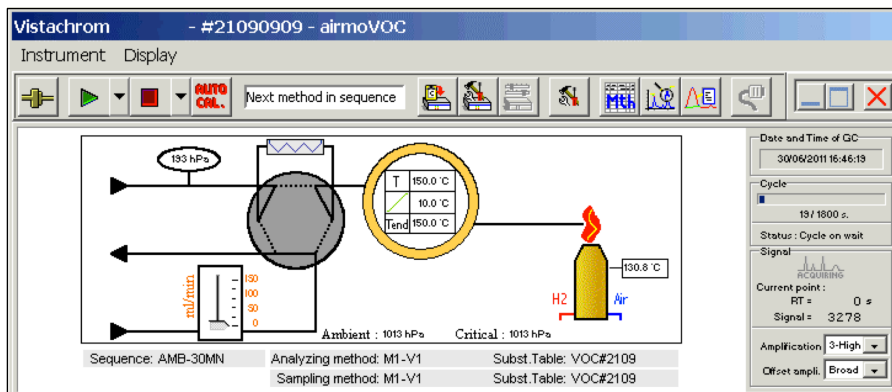


VistaCHROM软件，安装在嵌入式Windows XP平台上，给用户提分析仪器完全在线控制、数据采集和再处理的手段。

主要特性:

- 可选择内置计算机或监视器分离形式的仪器
- 程序的完全控制 - 一个模块可以引导最多3台分析仪
- 分析程序序列的编程
- 可实时观察色谱图
- 检测结果的完全可追溯性和校准的可追溯性 - 检测结果自动标记日期时间
- 校准和检测结果的自动确认
- 内部和外部自诊断 - 的仪器状况报告，带有50多个可能出现的不同的错误代码
- 多种信号输出可选 - MODBUS / JBUS / MGS1 / 4-20 mA / 0-10 V

分析特性:

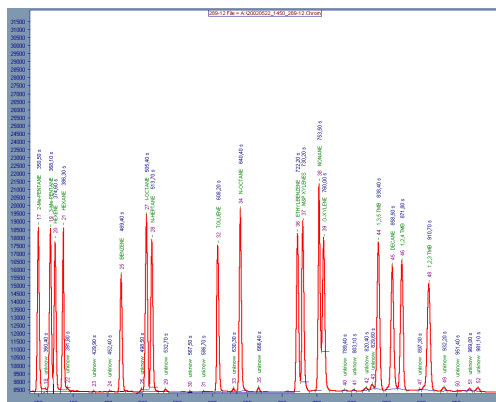

- 实时显示检测结果和色谱图
- 自动计算平均值
- 检测结果可换算为所有国际标准单位
- 可调节的报警界线
- 多路分析引导
- 存储器容量: 40 GB
- 自动打印报告
- PC-anywhere允许远程控制


Chromatotec®公司专门从事VOC、含硫化合物和永久气体微量、痕量（不仅在ppm、ppb、ppt级；而且还可以在%含量）的分析
欢迎访问我们的网站获取更多的信息

更新日期: 2014年4月


VistaCHROM 软件

Chromatotec®公司开发的一款功能强大而且易于应用的色谱分析法软件

快速进入分析程序序列

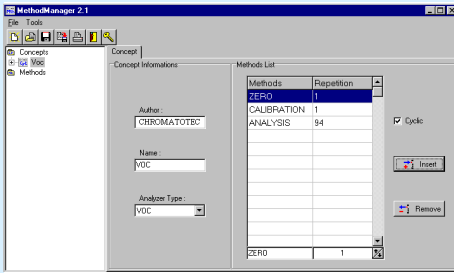

通过«PeakViewer»显示色谱图

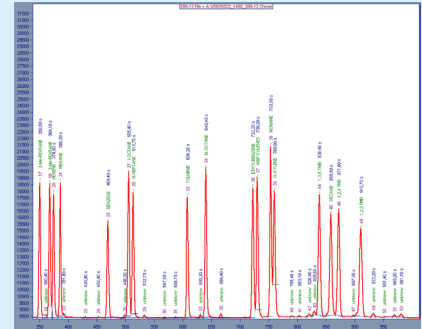


停止分析

视觉配置

启动分析

自连接

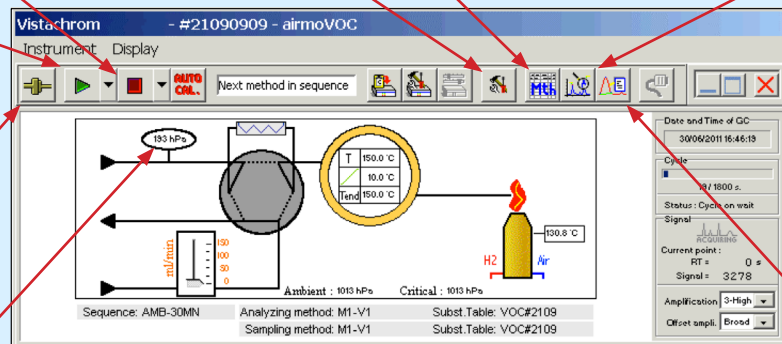

实时视觉诊断:

- 内部参数
- 色谱柱头压力
- 色温温度
- 取样流量

Plasma: 161			
---	--	--	--